



Sonda / Cânula Nasofaríngea Atraumática MedTech Descartável nº 7,0



Preço: R\$ 33,20

SKU (ref.): SN-7,0

Categoria do produto: [Sonda / cânula nasofaríngea atraumática MedTech - SNA-MedTech](#)

Página do produto:

<http://www.medtech.com.br/loja/?product=sonda-nasofaringea-atraumatica-medtech-descartavel-no-70>

Sumário do produto


Sonda / Cânula Nasofaríngea Atraumática MedTech nº 7,0 - Descartável
Tamanho: nº 7,0 (diâmetro interno de 7 mm) - equivalente à **FR - 28/30** -
pacientes de **MÉDIO PORTE**

Apresentação: **estéril** em embalagem individual pronta para uso imediato;

Acompanha manual de uso em português e limitador de introdução;

Para compras de *10 unidades* ou em múltiplos de 10, dê preferência à [caixas fechadas](#) deste mesmo produto ([SNA](#)). É mais econômico!!!

Descrição do Produto

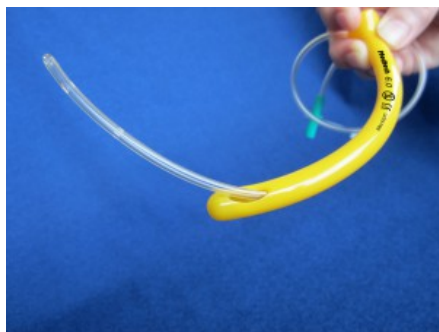

[Sonda / cânula nasofaríngea atraumática MedTech](#) - SNA-MedTech] nº 7,0 -

Descartável

Dispositivo muito útil para **facilitar a ventilação, mantendo as vias aéreas superiores permeáveis;**

Indicação: procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina e/ou em emergências.

Apresentação: **estéril** em **embalagem individual** pronta para uso imediato;

Validade da esterilização: 5 anos

Acompanha [manual de uso em português](#)];

Características da **SNA-MedTech**:

Tamanho: nº 7,0 (diâmetro interno de 7 mm) - pacientes de **MÉDIO PORTE** - equivalente à **FR - 28/30** - Comprimento: 10,0 cm

Cor contrastante (amarelo brilhante) para melhor visualização do dispositivo durante as manobras;

- # **Produzida em PVC siliconado termolábil**, permitindo que sua conformação se molde à anatomia local para uma melhor tolerância pelo paciente;
- # **Ponta distal atraumática**, maciça e arredondada: facilita a inserção;
- # **Extremidade distal com dois orifícios laterais** - conferem maior segurança na ventilação e permitem ainda a passagem de sonda nasogástrica e/ou aspiração;
- # **Rampa interna exclusiva** para direcionar a passagem de sonda nasogástrica e/ou aspiração;
- # **Borda proximal alargada em forma de funil** para melhor posicionamento e fixação, de forma a restringir o deslocamento inadvertido da sonda através da abertura nasal;
- # **Acompanha limitador de introdução** (alfinete de segurança próprio) para um ajuste no segmento introduzido visando uma melhor conformidade da SNA-MedTech ao paciente.

ISENTA DE LÁTEX

Produzida com exclusividade - Medtech

Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Ventilação | Via aérea superior | Dispositivo auxiliar para ventilação | Sonda nasofaríngea | Cânula nasofaríngea | Via Aérea Difícil |

Atributos do produto

- Dimensões: 28 x 8 x 1 cm
- Peso: 0.018 kg