


Sonda / Cânula nasofaríngea atraumática MedTech

SNA-MedTech

Registro MS ANVISA
10299940012

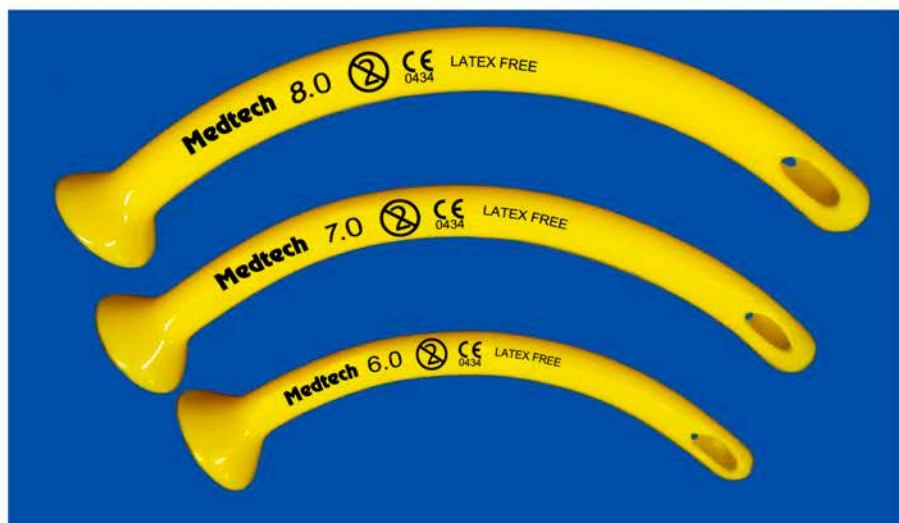

Estéril
Descartável
Isto de látex
Produzido em PVC siliconado

3 tamanhos
nº 6 (diâmetro interno de 6 mm)
nº 7 (diâmetro interno de 7 mm)
nº 8 (diâmetro interno de 8 mm)

Dispositivo auxiliar para facilitar a ventilação: mantém as vias aéreas superiores permeáveis
indicações: procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina e/ou emergências

Características SNA-MedTech

Cor contrastante (amarelo brilhante) para melhor identificação


Fabricada em material termolábil, permitindo que sua conformação se molde à anatomia local, com melhor tolerância pelo paciente



Ponta distal atraumática, maciça e arredondada, para facilitar sua inserção

Extermidade distal com dois orifícios laterais que conferem uma maior segurança na ventilação e permitem ainda a passagem de sonda nasogástrica e/ou aspiração

Rampa interna para guiar a passagem de sonda nasogástrica e/ou aspiração

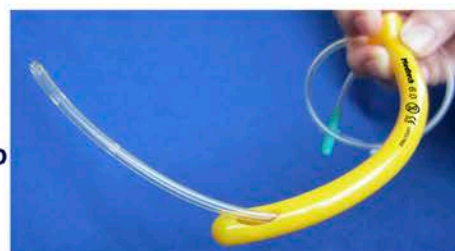

Borda proximal alargada em forma de funil para melhor posicionamento e fixação, de forma a restringir o deslocamento inadvertido da sonda através da abertura nasal

Para maiores detalhes visite:

www.medtech.com.br/nasofaringea/nasofaringea.htm

Av. Senador Pinheiro Machado, 24 Cj. 11
11075-000 SANTOS, SP

Tel.: 13-3234 1130 WhatsApp 13- 99713 4814

e-mail: medtech@medtech.com.br INTERNET: <http://www.medtech.com.br>