




“BOUGIE” - Guia MedTech para intubação traqueal (adulto 14F)

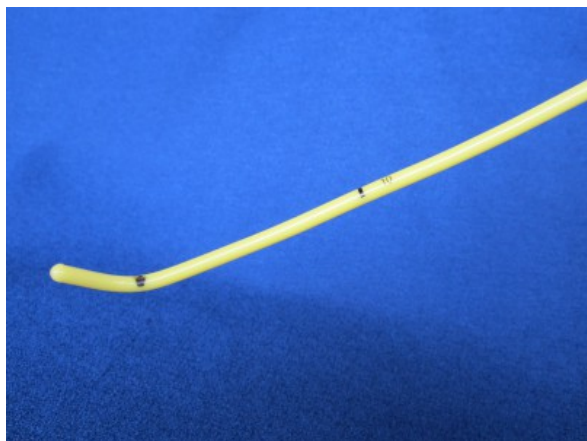

Preço: R\$ 30,40

SKU (ref.): B-ADT-14F

Categoria do produto: [Bougie - Guia MedTech para intubação traqueal](#), [Bougie - Guia MedTech para intubação traqueal - Convencional](#)

Página do produto:

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=bougie-guia-medtech-para-intubacao-traqueal-adulto-14f>

Sumário do produto

“BOUGIE” - Guia MedTech para intubação traqueal


Tamanho: **Adulto** - para uso com tubos traqueais entre 5.0mm a 10,0mm

Características: comp 70 cm / espessura 4,7 mm **(14F)**

Apresentação: **embalagem individual estéril - descartável**

Para compras de *10 unidades* ou em múltiplos de 10, dê preferência à [caixas fechadas](#) deste mesmo produto ([Bougie Adulto](#)). É mais econômico!!!

Descrição do Produto

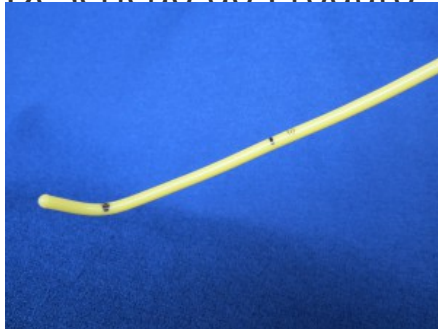

Guia “BOUGIE” Adulto MedTech para intubação traqueal

Descartável / estéril (Bougie Adulto MedTech)

Dispositivo auxiliar imprescindível para facilitar a intubação traqueal em procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina e/ou em emergências;

Indispensável em casos de intubação difícil !!!

Tamanho: **Adulto** para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm

Comprimento: **70 cm**

Espessura: 4,7 mm (14F)

* **Cor contrastante** (amarelo brilhante): destaca visualmente o Bougie-MedTech durante as manobras;

- * **Superfície anti-aderente**, facilita o deslizar do tubo traqueal;
- * **Segmento distal angulado** com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão;
- * Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso do Bougie-MedTech em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta)



- * **Marcações situadas na face anterior do** Bougie-MedTech favorecem a leitura durante o procedimento;
- * **Pontas arredondadas e atraumáticas;**

Fabricado em Polietileno de baixa densidade com superfície ultrapolida.

ISENTO DE LÁTEX # 

Apresentação: **estéril**, embalado em **envelope**

individual com face transparente e **pronto para uso imediato**



]

Produzido com exclusividade MedTech

Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Intubação | Intubação difícil | Dispositivo auxiliar para intubação | GIT | Guia para intubação traqueal | Bougie | Via Aérea Difícil | Guia Bougie | Guia Bougie para anestesia

Atributos do produto

- Dimensões: 69 x 10 x 0.6 cm
- Peso: 0.019 kg
- Tamanho:: 14F (4,7 mm)
- Apresentação:: Embalagem individual