



“BOUGIE” - Guia MedTech para intubação traqueal (adulto 14F) **Cx/10**



Preço: R\$ 339,80

**SKU (ref.):** B-ADT-14F-10

**Categoria do produto:** [Bougie - Guia MedTech para intubação traqueal](#), [Bougie - Guia MedTech para intubação traqueal - Convencional](#)

**Página do produto:**

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=bougie-guia-medtech-para-intubacao-traqueal-adulto-14f-cx10>

## Sumário do produto

“BOUGIE” - Guia MedTech para intubação traqueal

**CX com 10 unidades**

Tamanho: **Adulto** - para uso com tubos traqueais entre 5.0mm a 10,0mm



Características: comp 70 cm / espessura 4,7 mm **(14F)**

Apresentação: **CAIXA FECHADA COM 10 UNIDADES**, esterilizadas em **embalagens individuais descartáveis** prontas para **uso imediato**

## Descrição do Produto



# CAIXA FECHADA com 10 unidades do Guia “BOUGIE” MedTech para intubação traqueal **em embalagens individuais, esterilizados** e prontos para *uso imediato* ;  
**+ PRATICIDADE e ECONOMIA !!!**

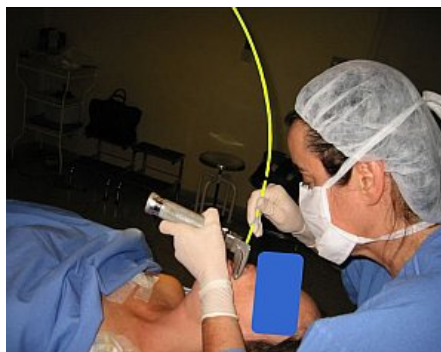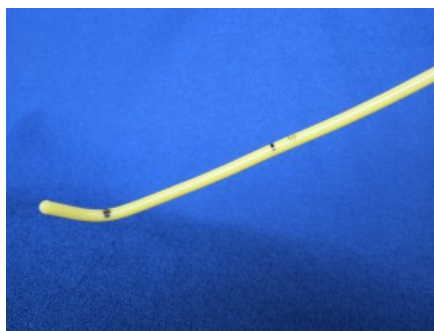

## **Guia “BOUGIE” MedTech para intubação traqueal**

Descartável / estéril (Bougie-MedTech)

Dispositivo auxiliar imprescindível para facilitar a intubação traqueal em procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina e/ou em emergências;

Indispensável em casos de intubação difícil !!!

Tamanho: **Adulto** para uso com tubos traqueais entre 5.0mm a 10,0mm

Comprimento: **70 cm**

Espessura: 4,7 mm (14F)

\* **Cor contrastante** (amarelo brilhante): destaca visualmente o Bougie-MedTech durante as manobras;

\* **Superfície anti-aderente**, facilita o deslizar do tubo traqueal;

\* **Segmento distal angulado** com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão;

\* Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso do Bougie-MedTech em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta)



\* **Marcações situadas** na face anterior **do** Bougie-MedTech favorecem a leitura durante o procedimento;

\* **Pontas arredondadas e atraumáticas;**

Fabricado em Polietileno de baixa densidade com superfície ultrapolidada.

# ISENTO DE LÁTEX # 

Apresentação: **estéril**, embalado em **envelope**

**individual** com face transparente e **pronto para uso imediato**



]

Produzido com exclusividade MedTech

**Qualidade Internacional** com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

**Registro** no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Intubação | Intubação difícil | Dispositivo auxiliar para

intubação | GIT | Guia para intubação traqueal | Bougie | Via Aérea Difícil | Guia Bougie | Guia Bougie para anestesia

## Atributos do produto

- Dimensões: 69.5 x 15 x 6 cm
- Peso: 0.325 kg
- Tamanho:: 14F (4,7 mm)
- Apresentação:: Caixa fechada com 10 unidades embaladas individualmente