




“BOUGIE” - Guia MedTech para intubação traqueal (intermediário 10F)

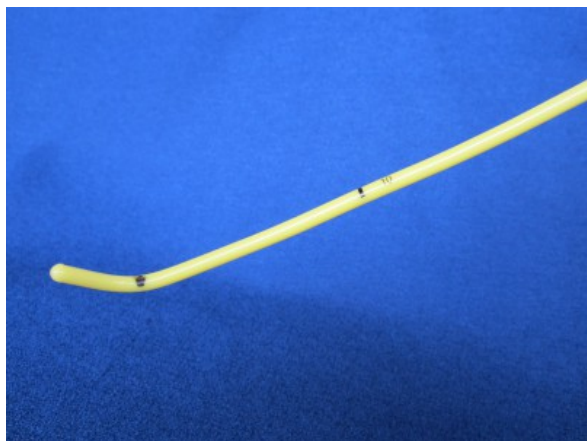

Preço: R\$ 34,60

SKU (ref.): B-INT-10F

Categoria do produto: [Bougie - Guia MedTech para intubação traqueal](#), [Bougie - Guia MedTech para intubação traqueal - Convencional](#)

Página do produto:

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=bougie-guia-medtech-para-intubacao-traqueal-intermediario>

Sumário do produto

“BOUGIE” - Guia MedTech para intubação traqueal



Tamanho: **INTERMEDIÁRIO** - para uso com tubos traqueais entre 4,0mm a 8,5mm

Características: comp 70 cm / espessura 3,3 mm (**10F**)

Apresentação: **embalagem individual estéril - descartável**

Para compras de *10 unidades* ou em múltiplos de 10, dê preferência a [caixas fechadas](#) deste mesmo produto (Bougie Intermediário). É mais econômico!!!

Descrição do Produto

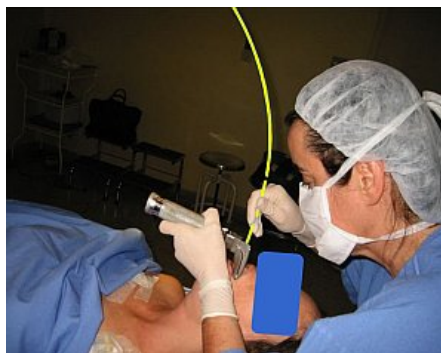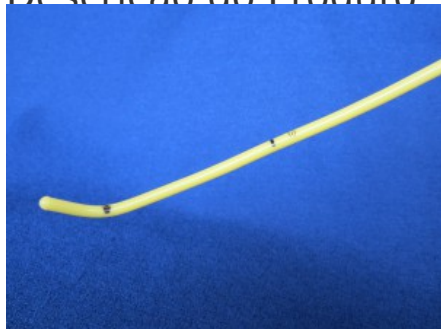

Guia “BOUGIE” INTERMEDIÁRIO MedTech para intubação traqueal

Descartável / estéril (Bougie-INTERMEDIÁRIO MedTech)

Dispositivo auxiliar imprescindível para facilitar a intubação traqueal em procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina e/ou em emergências;

Indispensável em casos de intubação difícil !!!


Tamanho: **Intermediário** para uso com tubos traqueais entre 4.0mm a 8,5mm

Comprimento: **70 cm**

Espessura: 3,3 mm (10F)

* **Cor contrastante** (amarelo brilhante): destaca visualmente o Bougie-MedTech durante as manobras;

- * **Superfície anti-aderente**, facilita o deslizar do tubo traqueal;
- * **Segmento distal angulado** com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão;
- * Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso do Bougie-MedTech em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta);

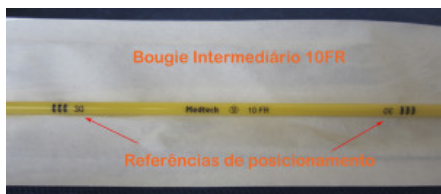

- * **Marcações situadas na face anterior do** Bougie-MedTech favorecem a leitura durante o procedimento;
- * **Pontas arredondadas e atraumáticas;**

Fabricado em Polietileno de baixa densidade com superfície ultrapolida.

ISENTO DE LÁTEX # ~~LÁTEX~~

Apresentação: **estéril**, embalado em **envelope individual** com face transparente e **pronto para uso imediato**



Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Intubação | Intubação difícil | Dispositivo auxiliar para intubação | GIT | Guia para intubação traqueal | Bougie | Via Aérea Difícil | Guia Bougie | Guia Bougie para anestesia

Atributos do produto

- Dimensões: 69 x 10 x 0.6 cm
- Peso: 0.010 kg
- Tamanho:: 10F (3,3 mm)
- Apresentação:: Embalagem individual