



Máscara Laríngea NovaMASC-DUO nº 2,0 Descartável - SILICONE **Cx-10**



Preço: R\$ 1.842,00

SKU (ref.): MDUO-02-1

Categoria do produto: [Máscara Laríngea Dupla Via - NOVAMASC-DUO](#), [Máscara Laríngea Dupla Via \(segunda geração\)](#)

Página do produto:

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamasc-duo-no-20-descartavel-silicone-cx-10>

Sumário do produto


MÁSCARA LARÍNGEA DUPLA VIA - DESCARTÁVEL NovaMASC-DUO nº 2,0

REF.: MDUO-02-1

Indicação: **Lactentes de 10 kg até pré-escolares de 20kg**

Apresentação: ESTÉRIL - CAIXA FECHADA COM 10 UNIDADES, em **embalagens individuais** prontas para **uso imediato**

Descrição do Produto

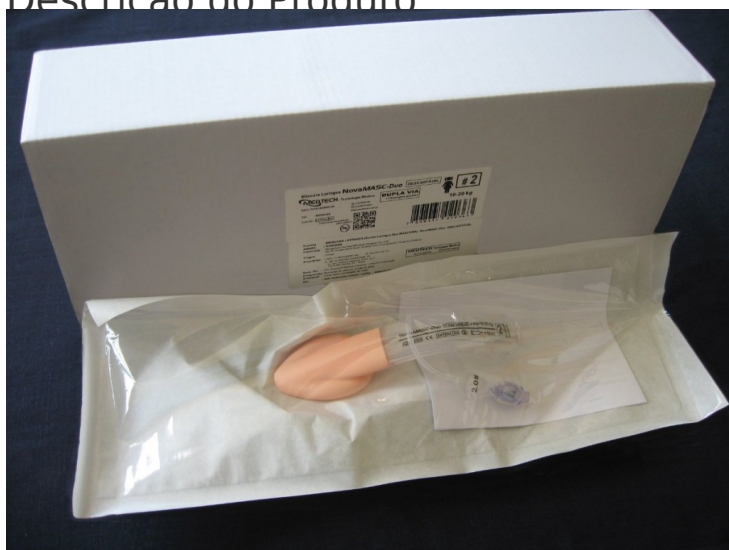

CAIXA FECHADA com 10 unidades de Máscaras Laríngeas NovaMASC-DUO Descartáveis nº 2,0 em SILICONE, embaladas individualmente, esterilizadas e prontas para *uso imediato*; + **PRATICIDADE e ECONOMIA !!!**




NovaMASC-DUO nº 2,0

Máscara Laríngea de SEGUNDA GERAÇÃO com DUPLO LÚMEN e ACESSO GÁSTRICO, inteiramente em silicone de grau médico, com protetor ANTI-MORDEDURA integrado e conformação anatômica em 'L'

ISENTA DE LÁTEX # ]

ISENTA DE FTALATOS (DEHP free)

MARCAÇÕES e ROTULAGEM em PORTUGUÊS # **ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS** - O maior período útil entre todas da categoria !!!

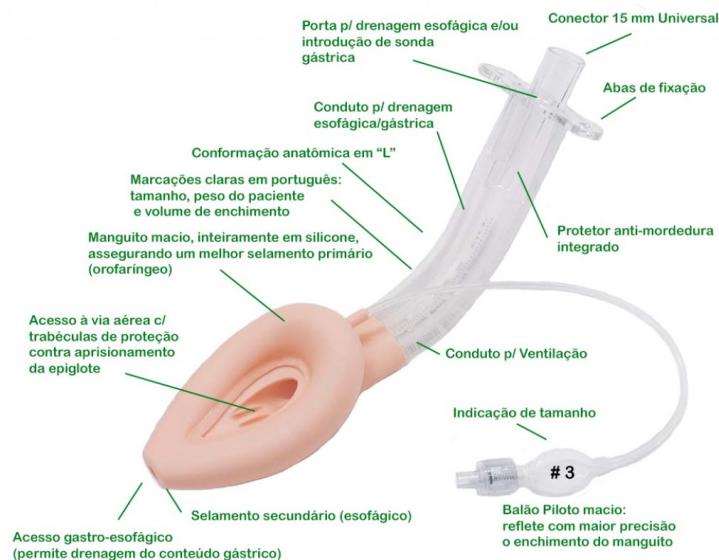

- ◆ Acompanha **manual em português**;
- ◆ **Código de barras** padronizado (EAN);
- ◆ Utiliza somente polímeros sem ftalatos (DEHP free);
- ◆ Inteiramente em SILICONE de grau médico de alta qualidade;
- ◆ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;
- ◆ **Fácil identificação:** informações em destaque no tubo e balão piloto sobre **tamanho (nº), volume, pressão** de enchimento e a faixa de **peso** do paciente melhor indicada para seu uso;
- ◆ **Tubo resistente** a acotovelamentos;
- ◆ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;
- ◆ Protetor anti-mordedura proximal integrado; Conector padrão 15mm ISO;
- ◆ Formato anatômico curvo **a 135º** : adequado à rápida inserção;
- ◆ DUPLA VIA com lúmen exclusivo para **acesso e drenagem gástrica** e outro somente para ventilação;
- ◆ Acesso independente para sondagem gástrica, permitindo descompressão passiva e ativa do conteúdo gástrico;
- ◆ Manguito (cuff) macio e conformável, que possibilita selamento proximal primário das vias aéreas e selamento distal secundário para o acesso esofágico-gástrico;
- ◆ Barras de proteção integradas ao coxim, que previnem obstrução acidental do

conduto ventilatório pela epiglote;

◆ Permite ventilação com pressão positiva igual ou superior a 30 cmH₂O com menor risco de aspiração;

◆ Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC-DUO / MedTech

◆ **Marca tradicional** e consagrada há duas décadas no Brasil !!!

Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA) nº 10299949002

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laríngea | Dupla Via | Acesso gástrico | Drenagem esofágica | Drenagem Gástrica | Dispositivo Supraglótico | Máscara Laríngea | Descartável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

Atributos do produto

- Dimensões: 39.0 x 33.0 x 9.5 cm
- Peso: 0.800 kg
- Tamanho:: nº 2,0
- Apresentação:: Caixa fechada contendo 10 unidades estéreis embaladas individualmente