



Máscara Laríngea NovaMASC-DUO nº 5,0 Descartável - **SILICONE**



Preço: R\$ 187,40

SKU (ref.): MDUO-05

Categoria do produto: [Máscara Laríngea Dupla Via - NOVAMASC-DUO](#), [Máscara Laríngea Dupla Via \(segunda geração\)](#)

Página do produto:

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=mascara-laringea-novamasc-duo-no-50-descartavel-silicone>

Sumário do produto

MÁSCARA LARÍNGEA DUPLA VIA - DESCARTÁVEL NovaMASC-DUO nº 5,0

REF.: MDUO-05

Indicação: **Adultos 70 a 100 kg**

Apresentação: **ESTÉRIL** em **embalagem individual** pronta para **uso imediato**

Para compras de *10 unidades* ou em múltiplos de 10, dê preferência à **caixas fechadas** deste mesmo produto ([MDUO-05-1](#)). É mais econômico!!!

Descrição do Produto



NovaMASC-DUO n° 5,0

Máscara Laríngea de SEGUNDA GERAÇÃO com DUPLO LÚMEN e ACESSO GÁSTRICO, inteiramente em silicone de grau médico, com protetor ANTI-MORDEDURA integrado e conformação anatômica em "L"


Descartável/Estéril

Esterilizada em **embalagem individual**, pronta para **uso imediato**;

ISENTA DE LÁTEX # []

ISENTA DE **FTALATOS** (DEHP free)

MARCAÇÕES e ROTULAGEM em PORTUGUÊS # **ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS** - O maior período útil entre todas da categoria !!!

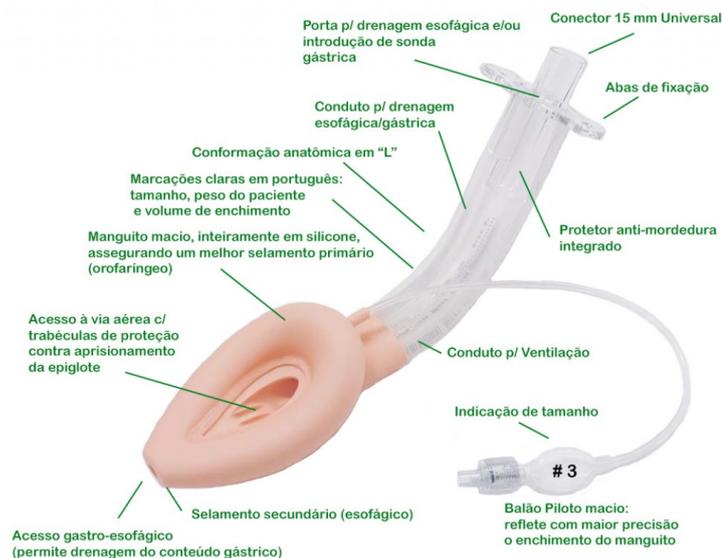

◆ Acompanha **manual em português**;

◆ **Código de barras** padronizado (EAN);

◆ Utiliza somente polímeros sem ftalatos (DEHP free);

◆ Inteiramente em **SILICONE** de grau médico de alta qualidade;

- ◆ **Marca linear** ao longo do tubo como referência de posicionamento;
- ◆ **Fácil identificação:** informações em destaque no tubo e balão piloto sobre **tamanho (nº), volume, pressão** de enchimento e a faixa de **peso** do paciente melhor indicada para seu uso;
- ◆ **Tubo resistente** a acotovelamentos;
- ◆ **Manguito macio** de alto volume e baixa pressão;
- ◆ Protetor anti-mordedura proximal integrado; Conector padrão 15mm ISO;
- ◆ Formato anatômico curvo **a 135º** : adequado à rápida inserção;
- ◆ DUPLA VIA com lúmem exclusivo para **acesso e drenagem gástrica** e outro somente para ventilação;
- ◆ Acesso independente para sondagem gástrica, permitindo descompressão passiva e ativa do conteúdo gástrico;
- ◆ Manguito (cuff) macio e conformável, que possibilita selamento proximal primário das vias aéreas e selamento distal secundário para o acesso esofágico-gástrico;
- ◆ Barras de proteção integradas ao coxim, que previnem obstrução acidental do conduto ventilatório pela epiglote;
- ◆ Permite ventilação com pressão positiva igual ou superior a 30 cmH2O com menor risco de aspiração;
- ◆ Fabricadas com exclusividade: modelo NovaMASC-DUO / MedTech
- ◆ **Marca tradicional** e consagrada há duas décadas no Brasil !!!

Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Máscara | Laringea | Dupla Via | Acesso gástrico | Drenagem esofágica | Drenagem Gástrica | Dispositivo Supraglótico | Máscara Laríngea | Descartável | Sonda Laríngea | Via Aérea Difícil |

Atributos do produto

- Dimensões: 40.00 x 15.00 x 4.50 cm

- Peso: 0.089 kg
- Tamanho:: nº 5,0
- Apresentação:: Embalagem individual estéril