



Sonda / Cânula Nasofaríngea Atraumática MedTech Descartável nº 6,0 - **Cx/10**



Preço: R\$ 509,00

SKU (ref.): SN-6,0-1

Categoria do produto: [Sonda / cânula nasofaríngea atraumática MedTech - SNA-MedTech](#)

Página do produto:

<https://www.medtech.com.br/loja/?product=sonda-canula-nasofaringea-atraumatica-medtech-descartavel-no-60-cx10>

Sumário do produto

Sonda / Cânula Nasofaríngea Atraumática MedTech nº 6,0 - Descartável
Tamanho: nº 6,0 (diâmetro interno de 6 mm) - equivalente à **FR - 24/26** -
pacientes de **PEQUENO PORTE** **Apresentação: CAIXA FECHADA COM 10**
UNIDADES, esterilizadas em **embalagens individuais descartáveis** prontas
para **uso imediato**


Acompanha manual de uso em português e limitador de introdução;

Descrição do Produto



CAIXA FECHADA com 10 unidades de Sonda/cânula nasofaríngea atraumática MedTech - SNA-MedTech nº 6,0 **em embalagens individuais, esterilizadas** e prontas para *uso imediato*;

+ PRATICIDADE e ECONOMIA !!!

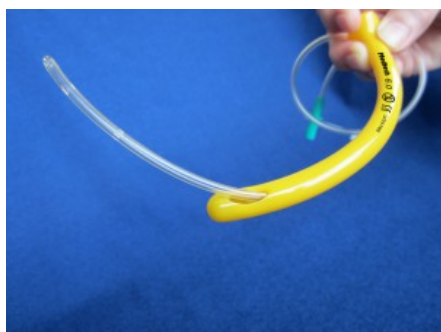

[Sonda / cânula nasofaríngea atraumática MedTech](#) -]SNA-MedTech nº 6,0 -

Descartável

Dispositivo muito útil para **facilitar a ventilação, mantendo as vias aéreas superiores permeáveis;**

Indicação: procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina e/ou em emergências.

Apresentação: **estéril** em **embalagem individual** pronta para uso imediato;

Validade da esterilização: 5 anos

Acompanha [manual de uso em português](#)];

Características da **SNA-MedTech**:

Tamanho: nº 6,0 (diâmetro interno de 6 mm) - pacientes de **PEQUENO PORTE**
- equivalente à **FR - 24/26** - Comprimento: 13,0 cm

Cor contrastante (amarelo brilhante) para melhor visualização do dispositivo durante as manobras;

Produzida em PVC siliconado termolábil, permitindo que sua conformação se molde à anatomia local para uma melhor tolerância pelo paciente;

Ponta distal atraumática, maciça e arredondada: facilita a inserção;

Extremidade distal com dois orifícios laterais - conferem maior segurança na ventilação e permitem ainda a passagem de sonda nasogástrica e/ou aspiração;

Rampa interna exclusiva para direcionar a passagem de sonda nasogástrica e/ou aspiração;

Borda proximal alargada em forma de funil para melhor posicionamento e fixação, de forma a restringir o deslocamento inadvertido da sonda através da abertura nasal;

Acompanha limitador de introdução (alfinete de segurança próprio) para um ajuste no segmento introduzido visando uma melhor conformidade da SNA-MedTech ao paciente.

ISENTA DE LÁTEX

Produzida com exclusividade - Medtech

Qualidade Internacional com certificação **ISO 9000** e **CE** - Empresa com Certificado de Boas Práticas (BPAD) Anvisa

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA)

Palavras chave: Anestesia | Ventilação | Via aérea superior | Dispositivo auxiliar para ventilação | Sonda nasofaríngea | Cânula nasofaríngea | Via Aérea Difícil |

Atributos do produto

- Dimensões: 27 x 27 x 12 cm
- Peso: 0.235 kg