

Bougie MedTech modelo Intermediário 10 F

Diâmetro externo: 3,3 mm

Comprimento: 700 mm


Para tubos traqueais: 4,0 a 8,5 mm

Composição: Polietileno de baixa densidade

Superfície ultrapolidada Isento de látex

Apresentação: estéril em envelope individual,
com uma face transparente e pronto para uso imediato

Características

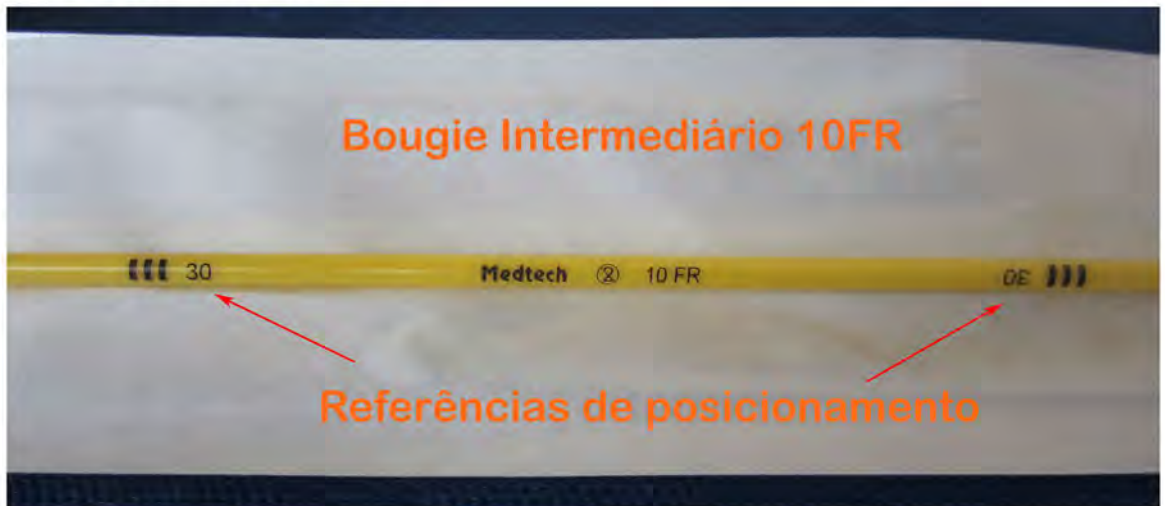

Cor contrastante (amarelo brilhante):

destaca visualmente o Bougie-MedTech durante as manobras

Superfície anti-aderente facilita o deslizar do tubo traqueal

Haste com escala graduada bilateral dupla e invertida:

*para referência de posicionamento em ambas as extremidades,
permite seu uso nos dois sentidos (extremidade angulada ou reta)*

Marcações situadas na face anterior, favorece a leitura durante o procedimento

Extremidades atraumáticas

Fabricante recomenda USO ÚNICO

Para maiores informações visite o endereço:

<http://www.medtech.com.br/guia.bougie/guia.intermediario10F.htm>