


**Guia "BOUGIE" MedTech Pediátrico 6F  
para intubação traqueal**

*Diâmetro externo 2,0 mm  
Comprimento 535 mm  
Para tubos traqueais 3,0 - 4,5 mm*

**Características**

*extremidade proximal reta  
extremidade distal reta  
ou angulada em aproximadamente 35 graus*

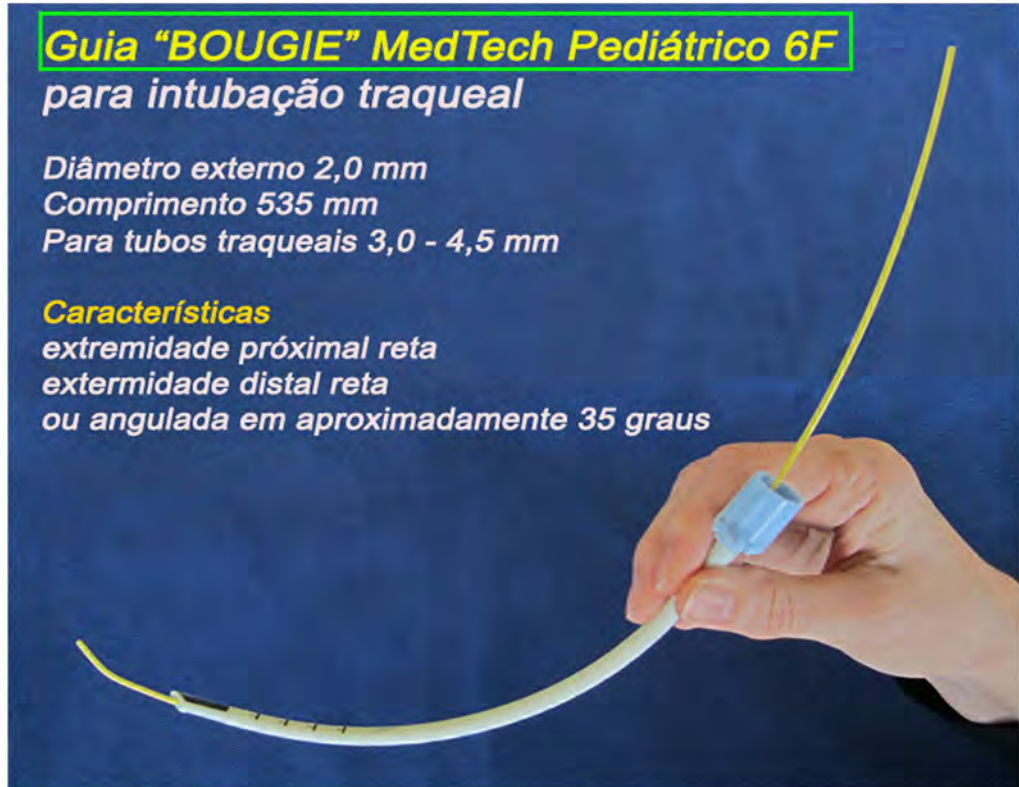

*Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente o Bougie-MedTech durante as manobras*

*Superfície anti-aderente, facilita o deslizar do tubo traqueal*

*Haste com escala graduada bilateral dupla e invertida para referência de posicionamento em ambas as extremidades: permite seu uso nos dois sentidos (extremidade angulada ou reta)*

*Marcações situadas na face anterior: favorece a leitura durante o procedimento*

*Extremidades atraumáticas      Fabricante recomenda USO ÚNICO*

*Apresentação: estéril, pronto para uso imediato    ISENTO DE LÁTEX*



# Para maiores informações visite o endereço:

<http://www.medtech.com.br/guia.bougie/guia.pediatico6F.html>

Av. Senador Pinheiro Machado, 24 Cj. 11  
11075-000 SANTOS, SP

Tel.: 13-3234 1130 WhatsApp 13- 99713 4814

e-mail: [medtech@medtech.com.br](mailto:medtech@medtech.com.br) INTERNET: <http://www.medtech.com.br>