

Bougie Medtech modelo Adulto 15 F

**Registro MS ANVISA
10299940016**

Diâmetro externo: 5,0 mm

Comprimento: 700 mm

Para tubos traqueais: 5,5 a 10,0 mm

Composição: Polietileno de baixa densidade

Superfície ultrapolidada

Isento de látex

Apresentação: estéril em envelope individual,
com uma face transparente e pronto para uso imediato

Características

Cor contrastante (amarelo brilhante)

destaca visualmente o Bougie-MedTech durante as manobras

Superfície anti-aderente

facilita o deslizar do tubo traqueal

Haste com escala graduada bilateral dupla e invertida

para referência de posicionamento em ambas as extremidades
permite seu uso nos dois sentidos

Marcações situadas na face anterior

favorece a leitura durante o procedimento


Extremidades atraumáticas

Fabricante recomenda USO ÚNICO

**Guia "Bougie" MedTech
embalagem individual**

Guia Tipo Bougie MedTech

Exemplo de uso com o tubo endotraqueal

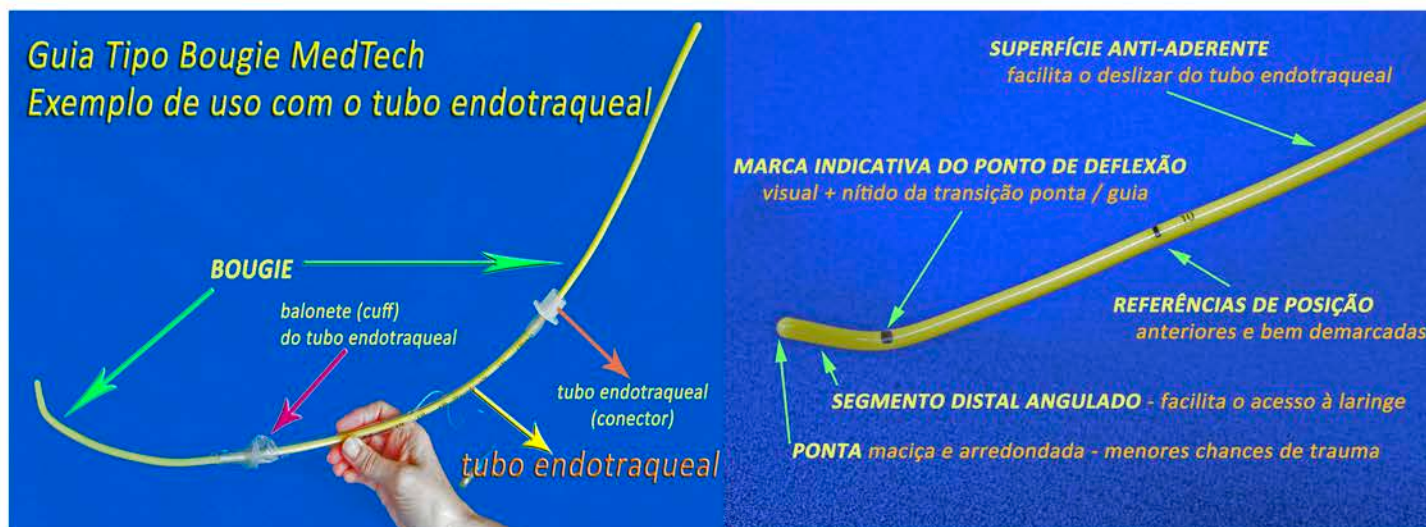

Para maiores detalhes, visite: <https://www.medtech.com.br/guia.bougie/guia.htm>

Av. Senador Pinheiro Machado, 24 Cj. 11

11075-000 SANTOS, SP

Tel.: 13-3234 1130 WhatsApp 13- 99713 4814

e-mail: medtech@medtech.com.br INTERNET: <http://www.medtech.com.br>