


## Sonda / Cânula nasofaríngea atraumática MedTech

### SNA-MedTech

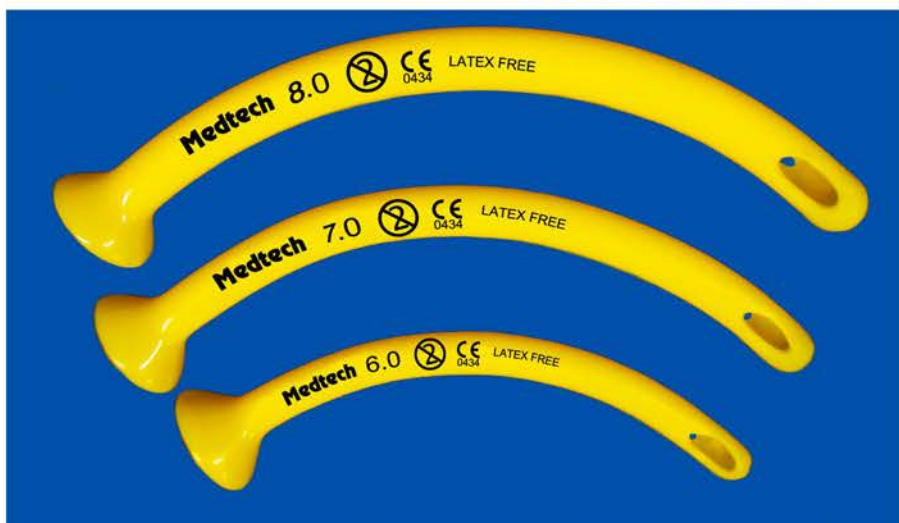

**Estéril**  
**Descartável**  
**Isto de látex**  
**Produzido em PVC siliconado**

**3 tamanhos**  
nº 6 (diâmetro interno de 6 mm)  
nº 7 (diâmetro interno de 7 mm)  
nº 8 (diâmetro interno de 8 mm)

Dispositivo auxiliar para facilitar a ventilação: mantém as vias aéreas superiores permeáveis  
indicações: procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina e/ou emergências

#### Características SNA-MedTech

Cor contrastante (amarelo brilhante) para melhor identificação

Fabricada em material termolábil, permitindo que sua conformação se molde à anatomia local, com melhor tolerância pelo paciente



Ponta distal atraumática, maciça e arredondada, para facilitar sua inserção

Extermidade distal com dois orifícios laterais que conferem uma maior segurança na ventilação e permitem ainda a passagem de sonda nasogástrica e/ou aspiração

Rampa interna para guiar a passagem de sonda nasogástrica e/ou aspiração



Borda proximal alargada em forma de funil para melhor posicionamento e fixação, de forma a restringir o deslocamento inadvertido da sonda através da abertura nasal

Para maiores detalhes visite:

[www.medtech.com.br/nasofaringea/nasofaringea.htm](http://www.medtech.com.br/nasofaringea/nasofaringea.htm)